


Металлодетекторы для фармацевтики Sartorius

Технические характеристики

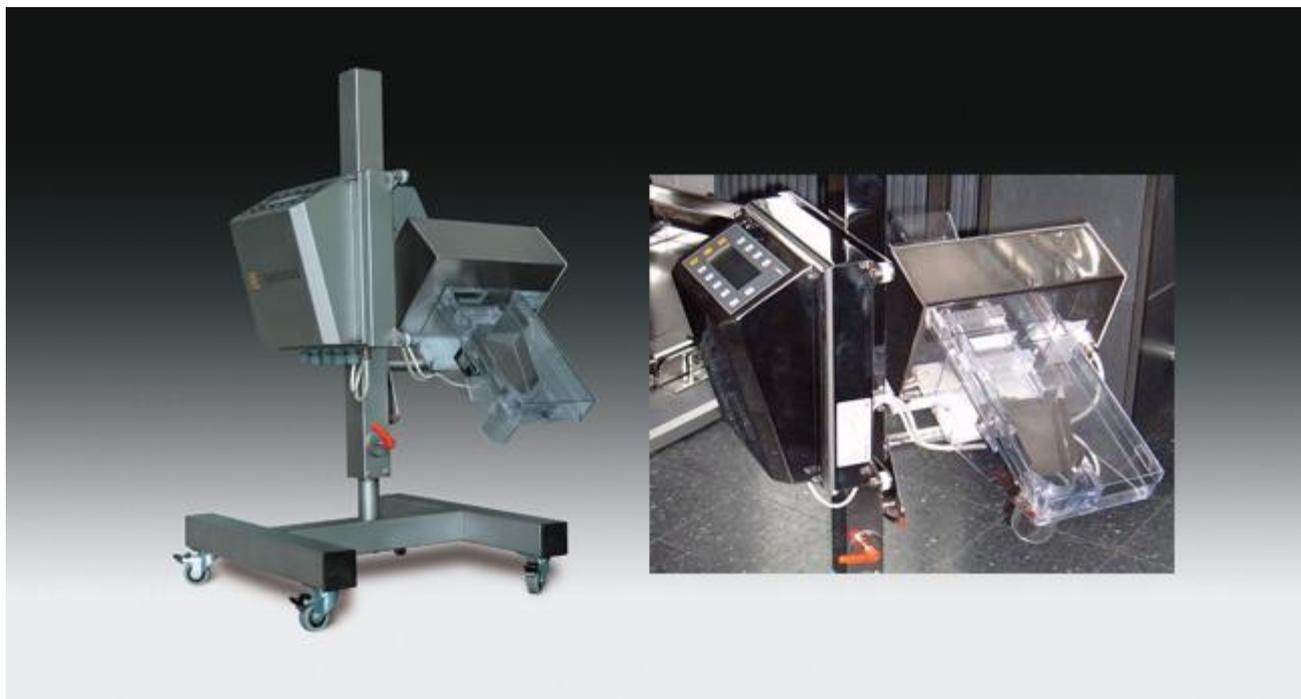

Фармацевтические металлодетекторы Sartorius предназначены для проверки таблеток после таблетпресса или пылеуловителя. Также фармацевтические металлодетекторы Sartorius могут быть использованы для проверки жевательной резинки в подушечках.

Производительность металлодетектора до 30 000 таблеток в минуту.

Система состоит из металлодетектора, регулируемой по высоте подставку от 600 до 1000 мм, наклонный желоб и автоматическое выбраковочное устройство. Угол наклона желоба можно изменять в диапазоне от 30 до 60 градусов.

Система отбраковки представляет из себя закрытый кожух из Макролона с направляющим лотком из нержавеющей стали сорта AISI 1.4301.

Все части кожуха легкодоступны для очистки поверхности при смене типа продукта.

Лоток отбраковки управляется высокоскоростным электромагнитным приводом.

Таблетки, содержащие металлические включения, направляются в патрубок и не попадают на линию упаковки.

Защитный механизм

При отключении электроэнергии отбраковывающий лоток находится в положении «отбраковка».

Чувствительность металлодетектора: 0,15 мм Fe; 0,35 VA, nonFe.

Оборудование соответствует требованиям GMP.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана+7(7172)727-132, Волгоград(844)278-03-48, Воронеж(473)204-51-73, Екатеринбург(343)384-55-89,
Казань(843)206-01-48, Краснодар(861)203-40-90, Красноярск(391)204-63-61, Москва(495)268-04-70,
Нижний Новгород(831)429-08-12, Новосибирск(383)227-86-73, Ростов-на-Дону(863)308-18-15, Самара(846)206-03-16,
Санкт-Петербург(812)309-46-40, Саратов(845)249-38-78, Уфа(347)229-48-12

sst@nt-rt.ru || sartorius.nt-rt.ru