

## Practum®



**По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:**

Астана+7(7172)727-132, Волгоград(844)278-03-48, Воронеж(473)204-51-73, Екатеринбург(343)384-55-89,  
Казань(843)206-01-48, Краснодар(861)203-40-90, Красноярск(391)204-63-61, Москва(495)268-04-70,  
Нижний Новгород(831)429-08-12, Новосибирск(383)227-86-73, Ростов-на-Дону(863)308-18-15, Самара(846)206-03-16,  
Санкт-Петербург(812)309-46-40, Саратов(845)249-38-78, Уфа(347)229-48-12

**sst@nt-rt.ru || sartorius.nt-rt.ru**

Новые весы Practum®  
Надежное взвешивание



Вкладывайте деньги с умом, не выбирая между точностью и надежностью. Современные и высокотехнологичные весы Sartorius разработаны и произведены в Германии, характеризуются высоким уровнем воспроизводимости и точности показаний.



Practum

Practum

## Вам понравится...

**Практичная и прочная ветрозащитная витрина**  
Для работы с данной ветрозащитной витриной не требуется значительного опыта. Витрина прочная и при этом полностью разбирается. Стеклопанели можно мыть в посудомоечной машине.

**Надежная система взвешивания всегда обеспечивает достоверные результаты измерений**  
Монолитная весовая ячейка гарантирует длительную бесперебойную эксплуатацию весов даже неопытным оператором.

**Удобное нижнее взвешивание крупногабаритных образцов**  
Точно взвешивать крупногабаритные образцы или образцы с магнитными свойствами проще при помощи специального устройства под весами.



#### Защита паролем

Весы оснащены блокировкой доступа к настройкам для исключения возможности непреднамеренного изменения параметров весов.

#### Документирование всех процессов с помощью USB-интерфейса и перенос данных в Microsoft® Excel

USB-интерфейс автоматически распознает подключенный к нему лабораторный принтер Sartorius. Результаты взвешивания также могут напрямую заноситься в таблицу Microsoft® Excel, без использования дополнительного программного обеспечения.

#### Простая регистрация результатов с функцией настройки интервала выведения данных

Весы автоматически документируют изменение массы в процессе поэтапного взвешивания.

#### Простота нивелировки

Всего две большие, легко управляемые ножки и пузырьковый уровень на лицевой панели весов облегчают выравнивание весов и способствуют получению надежных и воспроизводимых результатов взвешивания.



**Plug & Play**  
Стандартный принтер YPD40

# Новые весы Practum®

## Надежное взвешивание

С новыми весами Practum® вы не допустите ни единой ошибки: Practum® – это сверхпрочные, надежные лабораторные весы, подходящие для всех стандартных вариантов применения. Вы оплачиваете только те функции которые Вам необходимы.



### Взвешивание

От минимального веса образца до образца весом в несколько килограмм, взвешивание твердых крупных образцов и точное взвешивание самых малых количеств паст, порошков и жидкостей.



### Подсчет

Весы помогут вам подсчитать количество идентичных предметов: таблеток, болтов и т. д. Это будет проще, быстрее и точнее, чем вручную.



### Определение плотности

С весами Practum® и набором для определения плотности, поставляемым дополнительно, вы можете вычислить плотность любого твердого тела.



### Определение максимального значения

С помощью этой функции вы можете измерить максимальную силу, например, импульсную силу прыгающего мяча, или взвесить крупногабаритный груз, который значительно больше платформы весов и закрывает собой дисплей.



### Контроль

Вы можете проверить, не выходят ли различные образцы, например, упаковочные единицы, за пределы допустимого диапазона.




### Динамическое взвешивание

Программа позволит вам работать в чрезвычайно нестабильных условиях, или взвешивать лабораторных животных.



### Определение процентного отклонения массы

Поможет сравнить различные образцы и определить отклонение от эталона в процентах.

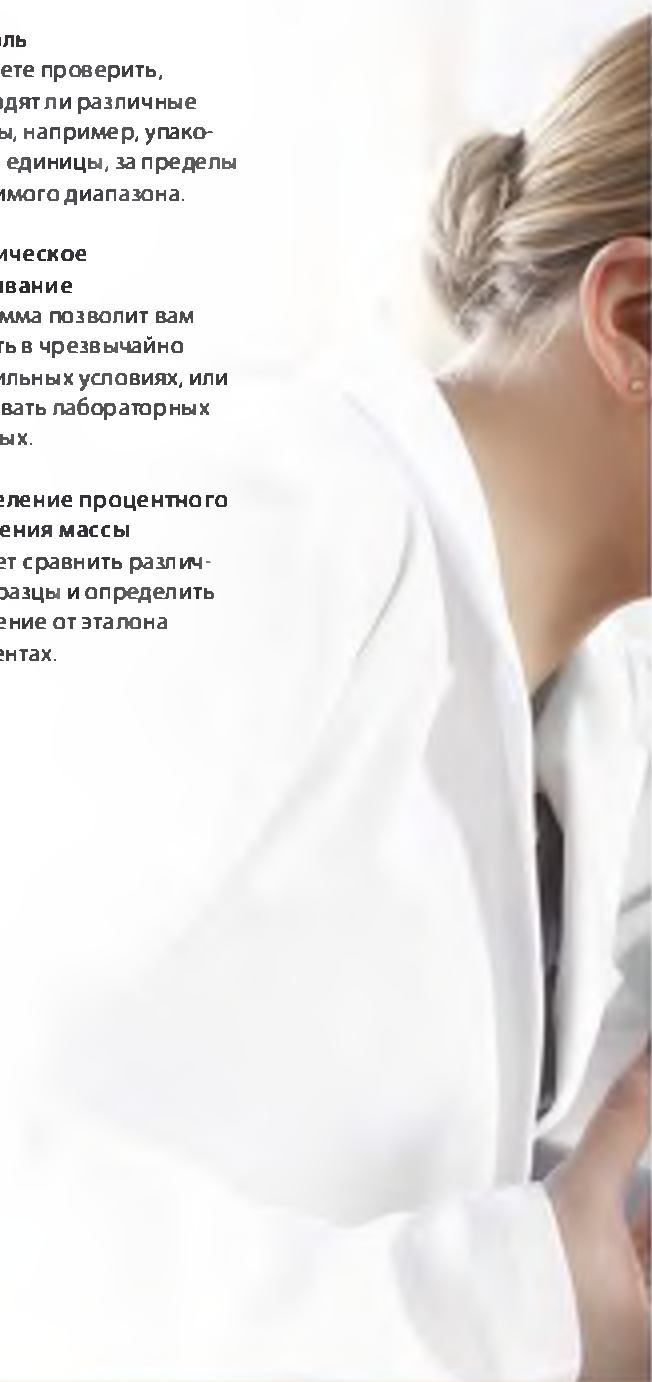



Practum



Изображения весов

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

Practum®

ГОСТОIMLR 76-1-2011

224-10RU	124-10RU	64-10RU	513-10RU	313-10RU	213-10RU	3102-10RU	2102-10RU	1102-10RU	612-10RU	5101-10RU	5100-10RU
CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD
220	120	60	510	310	210	3100	2100	1100	610	5100	5100
0,0001	0,0001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,01	0,01	0,01	0,01	0,1	1
0,001	0,001	0,01	0,01	0,01	0,01	0,1	0,1	0,1	0,1	1	1
0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,5	0,5	0,5	0,5	5	50
2	2	2	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	2	2
90	90	90	120	120	120	180	180	180	180	180	180
209	209	209	209	209	209	-	-	-	-	-	-
	4,5			4,9				3,1			
	. 1			. 2				. 3			
( )	360 x 216 x 320				360 x 216 x 95						
	Mini USB						SartoriusYDP40				
-					Microsoft**						
-											
-					SBI,						
-											

(5 )

« »

**По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:**

Астана+7(7172)727-132, Волгоград(844)278-03-48, Воронеж(473)204-51-73, Екатеринбург(343)384-55-89,  
 Казань(843)206-01-48, Краснодар(861)203-40-90, Красноярск(391)204-63-61, Москва(495)268-04-70,  
 Нижний Новгород(831)429-08-12, Новосибирск(383)227-86-73, Ростов-на-Дону(863)308-18-15, Самара(846)206-03-16,  
 Санкт-Петербург(812)309-46-40, Саратов(845)249-38-78, Уфа(347)229-48-12

**sst@nt-rt.ru || sartorius.nt-rt.ru**